

Designparameter Exocad für Druckdienstleistung




Modellgestaltung mit Modelltyp „Demo Occlusal Plane without plate“



Designparameter Exocad für Druckdienstleistung



Stumpfgestaltung

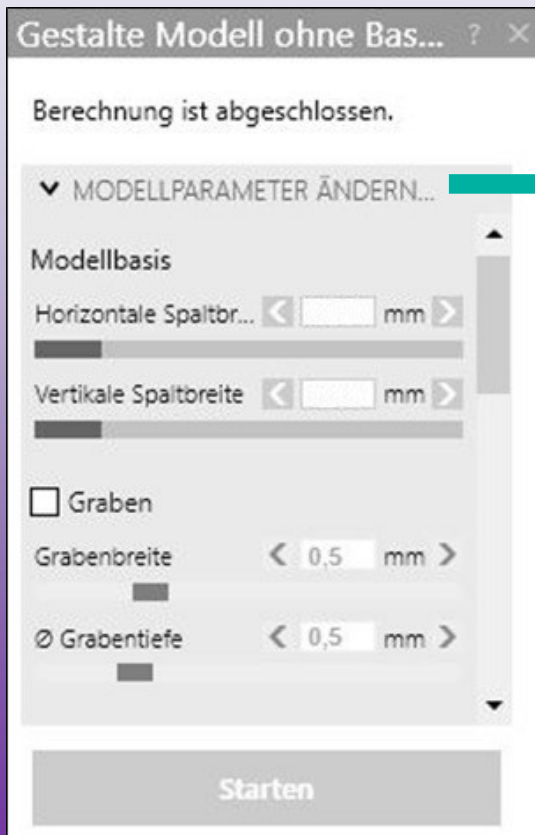

	SHERAprint model plus		SHERAprint model UV
	Grey	Sand	smoky white
Modellbasis			
Horizontale Spaltbreite	0,03 mm	0,03 mm	0,04 mm
Vertikale Spaltbreite	0,03 mm	0,03 mm	0,04 mm
Graben	deaktivieren	deaktivieren	deaktivieren

Designparameter Exocad für Druckdienstleistung



Stumpfgestaltung

Wizard Gestalte Modell ohne Basisplatte ?

Berechnung ist abgeschlossen.

▼ MODELLPARAMETER ÄNDERN...

Dies

Pinhöhe mm

Extrusion der Präpa... mm

Breite der Auflagefl... mm

Die-Pins auslassen

Unterkehlung

Entnahnehilfe

Starten

Dies

Pinhöhe: 2 mm

Extrusion der Präparation: 0 mm

Breite der Auflagefläche: 1 mm

Die-Pins auslassen: aktivieren

Unterkehlung: optional

Entnahnehilfe: deaktivieren

Designparameter Exocad für Druckdienstleistung



Stumpfgestaltung

Wizard **Gestalte Modell ohne Basisplatte** ?

Berechnung ist abgeschlossen.

▼ MODELLPARAMETER ÄNDERN...

Tiefe < 1 mm >

Hohles Modell

Wandstärke < 2 mm >

Kleinsten Hohlraum... < 0 mm >

Fräsbares Modell

Fräskopfdurchmess... < 1,2 mm >

Starten

Tiefe: 1 mm

Hohles Modell: aktivieren

Wandstärke: 2 mm

Kleinsten Hohlraum: 0 mm

Fräsbares Modell: deaktivieren