


Designparameter Exocad für Druckdienstleistung




Modellgestaltung mit Modelltyp „Demo Occlusal Plane without plate“

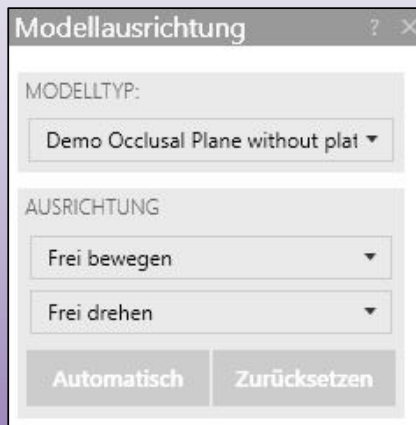

Designparameter Exocad für Druckdienstleistung



Stumpfgestaltung

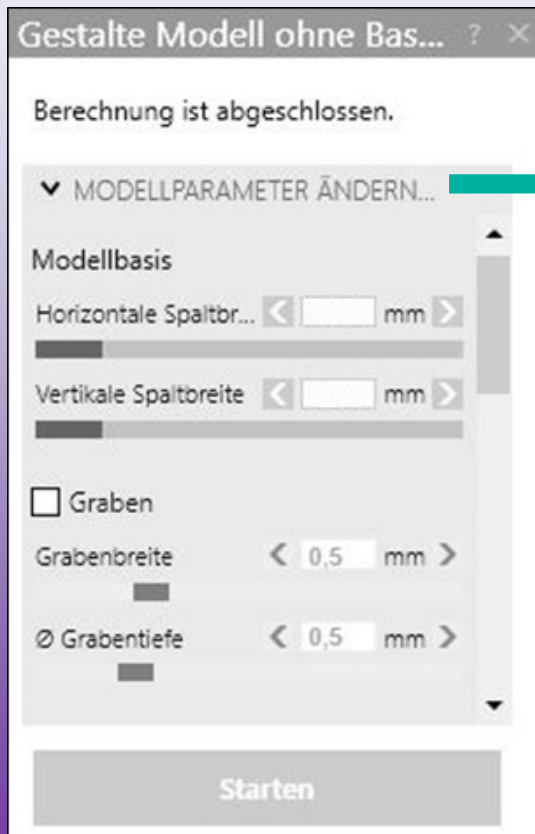

	SHERAprint model	SHERAprint model plus	SHERAprint model UV
	Stone	Desert	Smoky White
Modellbasis			
Horizontale Spaltbreite	0,02 mm	0,02 mm	0,04 mm
Vertikale Spaltbreite	0,02 mm	0,02 mm	0,04 mm
Graben	deaktivieren	deaktivieren	deaktivieren

Designparameter Exocad für Druckdienstleistung



Stumpfgestaltung

Wizard Gestalte Modell ohne Basisplatte ?

Berechnung ist abgeschlossen.

▼ MODELLPARAMETER ÄNDERN...

Dies

Pinhöhe mm

Extrusion der Präpa... mm

Breite der Auflagefl... mm

Die-Pins auslassen

Unterkehlung

Entnahmehilfe

Starten

Dies

Pinhöhe: 2 mm

Extrusion der Präparation: 0 mm

Breite der Auflagefläche: 1 mm

Die-Pins auslassen: aktivieren

Unterkehlung: optional

Entnahmehilfe: deaktivieren

Designparameter Exocad für Druckdienstleistung



Stumpfgestaltung

Wizard **Gestalte Modell ohne Basisplatte** ?

Berechnung ist abgeschlossen.

▼ MODELLPARAMETER ÄNDERN...

Tiefe < 1 mm >

Hohles Modell

Wandstärke < 2 mm >

Kleinster Hohlraum... < 0 mm >

Fräsbares Modell

Fräskopfdurchmess... < 1,2 mm >

Starten

Tiefe: 1 mm

Hohles Modell: aktivieren

Wandstärke: 2 mm

Kleinster Hohlraum: 0 mm

Fräsbares Modell: deaktivieren